

Producto Estación Poliuretano ® Diphoterine
Código 600130

Descripción	Estación Poliuretano con ruedas que contiene : Dap Diphoterine ® 5000 ml + Mini Dap 200 ml + LPMD 500 ml	
Marca	Diphoterine ® Prevor	
Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
<p>Estación móvil de poliuretano que contiene ®Diphoterine ducha de descontaminación química de emergencia para piel y ojos.</p> <p>Para zonas como: brazos, piernas, ambos ojos y el cuerpo completo.</p>		
Imagen referencial		
	Contenido	1 Dap de 5 L 1 Mini Dap 200 ml 2 Lavaojos 500 ml 1 After Wash 1 Señaléticas
	Peso	15 kg
	Contenido	Estación poliuretano contiene varios formatos de Diphoterine®
	Utilización	Todo el cuerpo ojos y piel
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Incluye estación plástica con ruedas, para protección y traslado de Diphoterine ®.
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	Un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Recargable	Únicamente Dap 5 Litros es recargable
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
	Gas propulsor	Dióxido de carbono y Nitrógeno Comprimido Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.

Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fácil de mover hacia el lugar del accidente. ▪ Contiene todos los formatos para todos los tipos de quemaduras químicas. ▪ Formato Recargable ▪ Robusto tanque, Resistente a la corrosión ambiental. ▪ Útil para usar en cualquier lugar de la planta ▪ Fácilmente identificable y manejable. ▪ Utilización simple y lista para el uso. ▪ Permite una acción rápida. ▪ Solución estéril. ▪ Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. ▪ Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. ▪ Impermeable y compacto. ▪ Sin mantenimiento ni instalación particulares. ▪ Conforme a la norma EN 15154-4. ▪ Certificación CE. 	
Características Diphoterine®	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Máximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico</p> <p>Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>	

Paso a paso

1. Despejar y quitar la ropa	2. Abrir y activar la ducha emergencia	3. Aplicar el formato completo sobre la zona	4. Avisar y consultar medico
			

Protocolo de uso

Use cada formato de Diphoterine® para la zona del cuerpo según el protocolo Prevor

INTERVENCIÓN EN EL PRIMER MINUTO



Intervención en los
10 primeros segundos




Usar
1 LIS
50 ml

Intervención entre
10 y 60 segundos




Usar
1 LPM
500 ml

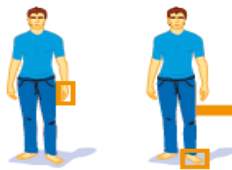

3% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 MICRO DAP
100 ml

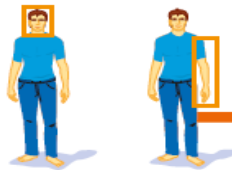

9% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 MINI DAP
200 ml



+9% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 DAP
5 litros

Datos de Contacto :

www.sagita.cl

56222441191

scliente@sagita.cl

www.diphoterine.cl

56222441114

cotec@sagitaotec.cl

www.sagitasalud.cl

56973765587 -56933821370

consulta@sagitasalud.cl

Curso "Correcto uso de ®Diphoterine "Código Sence 1238000800.