DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 - 2025

Producto **Botiquín mural acrílico**

Código **700001**

1. Descripción	Botiquín mural acrílico	
2. Marca	Prevor	
3. Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
Botiquín acrílico mural Diphoterine®, Ducha de emergencia química para descontaminación ocular y cutánea. Permite el lavado ocular dentro del primer minuto ocurrida la salpicadura y zonas del cuerpo como rostro y cuello, brazo completo y superficies corporales similares.		
4. Imagen referencial		
5. Contenido	**Descripción**	**Cantidad**
	LMPD Diphoterine® Botella 500 mL lavado ojos	**1 UN**
	MINI Diphoterine® 200 mL lavado para piel	**1 UN**
6. Características específicas del botiquín	Material	Acrílico
	Dimensiones	27 x 14 x 6 cm
	Otros	Señalética lavado ocular y cutáneo Orificios para fijación a muro
7. Aplicaciones	• Pequeñas áreas de atención: • Policlínicos • Ambulancias	

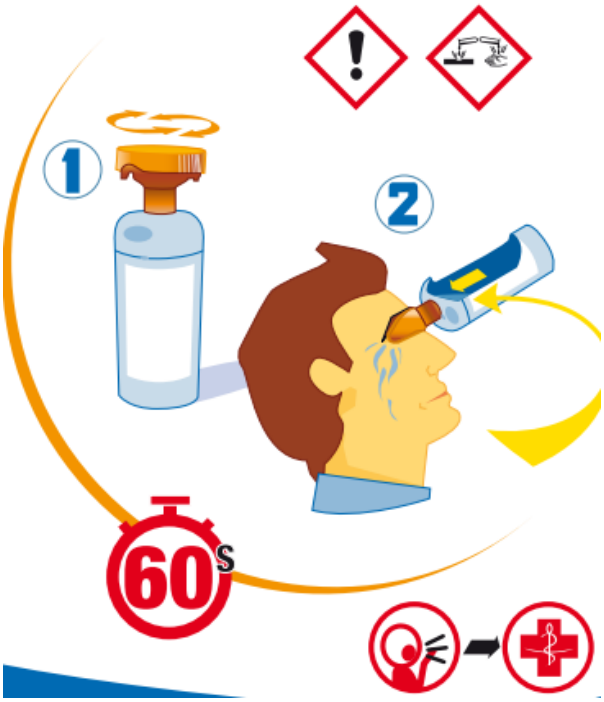
	• Unidades de rescate • Sala de primeros auxilios • Laboratorios
Características Técnicas Diphoterine® MINI DAP	
8. Imagen referencial	
9. Características Diphoterine®	Diphoterine® es una ducha de emergencia química polivalente, capaz de evitar la quemadura química. • **Máximo efecto:** Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. • Solución Hipertónica, Anfótera, Multiagente. • Sin reacciones químicas ni efectos secundarios. • Libre de fosfatos. • No es Tóxica • Solución de lavado estéril. • Conforme a la norma EN 15154-3
	Cobertura: Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. **En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)*
	Mecanismo de acción: Acción física sobre el producto químico. Encapsula, inactiva y extrae el químico sin efectos secundarios.
	Superficie de intervención: Rostro, brazo o superficie corporal equivalente. En caso de usar sobre rostro, cierre los ojos durante su aplicación.

	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos, idealmente inmediatamente después del contacto con el producto químico.
	Clasificación MINSAL	Dispositivo medico clase II. *Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.*
	Gas propulsor	Nitrógeno. Clasificación Clase 2.2 – Gas no inflamable. *Según NCh 382 – NCh 2190*
	Recomendaciones de uso	• Solución de un solo uso. Desechar luego de vaciar el contenido. • Almacenar entre 2° y 50° C. • Temperatura optima de uso entre 15° y 35°.
10. Protocolo de uso	Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel. Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. **Superficie de intervención:** Rostro, brazo o superficie corporal equivalente. En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.  	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 - 2025

Características Técnicas Diphoterine® LPMD		
11. Imagen referencial		
12. Características Diphoterine®	Diphoterine® es una ducha de emergencia química polivalente, capaz de evitar la quemadura química. • **Máximo efecto:** Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. • Solución Hipertónica, Anfótera, Multiagente. • Sin reacciones químicas ni efectos secundarios. • Libre de fosfatos. • No es Tóxica • Solución de lavado estéril. • Conforme a la norma EN 15154-4	
	Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. **En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)*
	Mecanismo de acción	Acción física sobre el producto químico. Encapsula, inactiva y extrae el químico sin efectos secundarios.
	Superficie de intervención	Indicado para salpicaduras oculares. Una botella de 500 ml permite la descontaminación de un ojo

	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos, idealmente inmediatamente después del contacto con el producto químico.
	Clasificación MINSAL	Dispositivo medico clase II. *Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.*
	Recomendaciones de uso	• Solución de un solo uso. Desechar luego de vaciar el contenido. • Almacenar entre 2° y 50° C. • Temperatura optima de uso entre 15° y 35°.
13. Protocolo de uso	Formato indicado para proyecciones sobre ojo después de una salpicadura química. Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. **Superficie de intervención:** Un ojo. **Para perfeccionar su aplicación, se recomienda utilizar una solución post-lavado o Afterwash para permitir que el ojo recupere un estado de confort.* 	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 - 2025

scliente@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587